



UNIVERSITÉ D'ANGERS
UFR INFORMATIQUE

RAPPORT DE STAGE
MASTER 1 2016-2017



UMR INSERM 1232
-EQUIPE IMMUNITÉ INNÉE ET IMMUNOTHÉRAPIE

ANALYSE TRANSCRIPTOMIQUE

Présenté par :
RASOLONIAINA
MARLINO

Tuteur : M. Le TUTEUR
Chef d'équipe : M. Chef
D'ÉQUIPE

12 Avril 2017 — 20 Juin 2017

Table des matières

1	INTRODUCTION :	2
2	ACQUISITION DES DONNÉES :	2
2.1	Les puces à ADN :	2
2.2	La technologie Illumina :	3
2.3	Plan expérimental :	4
2.4	Les sources de variations et les défis sur l'utilisation des puces ADN :	5
3	DESCRIPTION DES DONNÉES :	6
3.1	Décryptage et lecture :	6
3.2	Données brutes via Bioconductor :	6
3.3	Contrôle et qualité :	6
4	PRÉTRAITEMENT DES DONNÉES :	9
4.1	Transformation :	9
4.2	Normalisation :	9
4.3	Filtrage :	9
5	ANALYSE DES DONNÉES DE TRANSCRIPTOME :	9
5.1	Gènes différentiellement exprimés :	9
5.2	Gènes co-exprimés :	9
6	INTERPÉTATION :	9

1 INTRODUCTION :

2 ACQUISITION DES DONNÉES :

2.1 Les puces à ADN :

Une puce à ADN est constituée d'un support physique (le plus souvent une lame de verre) sur lequel sont déposées des molécules d'ADN correspondant à de petits fragments du génome (jusqu'à 40 000 dépôts différents par puce). On recouvre la puce de la solution contenant la population d'ARN à étudier. Les ARN s'hybrident sur les fragments d'ADN complémentaires. La quantité d'ARN fixée reflète la concentration de cet ARN dans la solution.

Pour des raisons pratiques, on utilise des ADNc plutôt que directement les ARN. Les ADNc sont marqués par un nucléotide radioactif ou un fluorochrome. Il est possible d'étudier simultanément plusieurs populations d'ADNc sur une même puce en utilisant des fluorochromes différents. La meilleure façon d'utiliser cette possibilité est de marquer l'ADN génomique avec un fluorochrome, toujours le même. On obtient ainsi une référence stable au cours des années qui permet de mettre toutes les puces à la même échelle, quelle que soit leur origine.

Un scanner mesure l'intensité du signal émis par l'ADNc hybridé au niveau de chaque dépôt. Parmi les valeurs que proposent les logiciels pour cette intensité, la plus fiable est la médiane de l'intensité des pixels car elle est moins sensible aux défauts de l'image (pixels sur-brillants par exemple).

Les puces comportent généralement plusieurs dépôts identiques pour chaque gène. Cela simplifie le travail lorsqu'il faut repérer les aberrations dans la lecture des intensités puisqu'il suffit d'examiner les cas où les valeurs diffèrent beaucoup d'un dépôt à l'autre. Il s'agit le plus souvent d'un défaut physique sur la puce et il est facile d'éliminer la valeur aberrante. Dans le doute, on conserve la médiane des différentes mesures.

Plusieurs types de puces à ADN existent selon le support, la nature des fragments fixés à la surface, le mode de fabrication, la densité, le mode de marquage des cibles et les méthodes d'hybridation. On sait que toutes les technologies à puce ADN se base sur le principe fondamental de l'hybridation complémentaire des brins d'acide nucléique même si leurs techniques se diffèrent largement entre-elles, par exemple sur la longueur et la type de la sonde utilisée (cDNA arrays, oligonucleotide array), l'étiquetage et le protocole d'hybridation. . . La vraie différence entre ses approches réside sur la précision, la spécificité, la sensibilité et la robustesse de chaque plateforme.

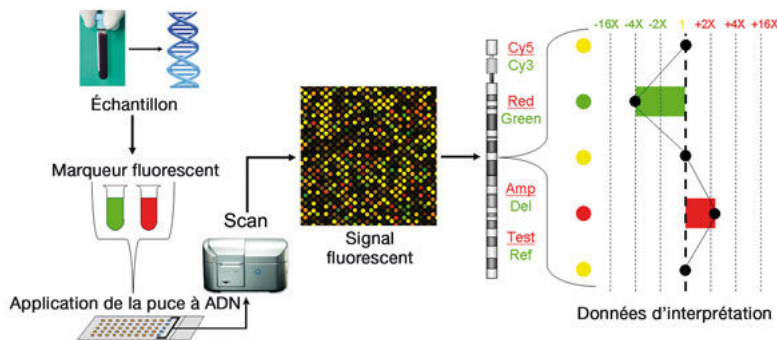


FIGURE 1 – Principe général d'utilisation des puces ADN

2.2 La technologie Illumina :

Illumina, Inc. est une société américaine qui fabrique et commercialise des systèmes intégrés pour l'analyse de la variation génétique et la fonction biologique notamment des gammes de produits et services qui servent les marchés du séquençage, génotypage et expression génétique.

Une de ces récentes fabrications, la puce "BeadArray technologie".

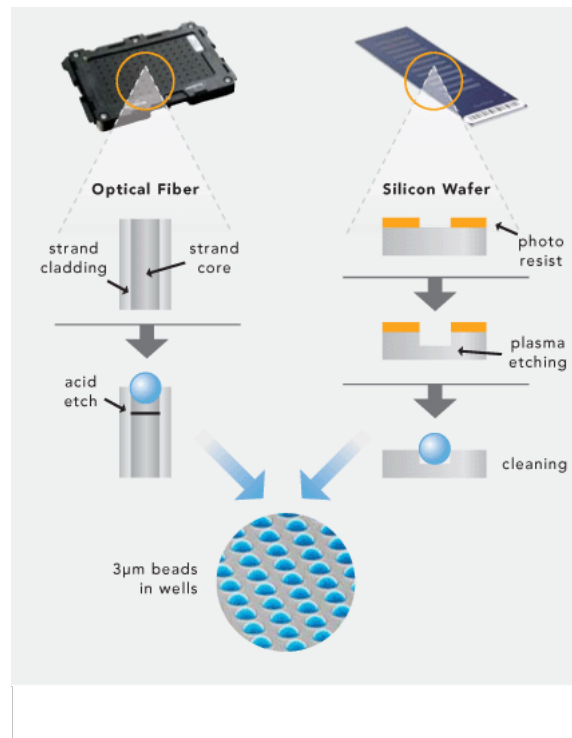


FIGURE 2 – Illumina BeadArray Technologie

Dans l'analyse des expressions des gènes, Illumina utilise deux approches différentes : l'hybridation directe (Direct Hybridization assay) et le DASL (cDNA-

mediated Annealing Selection Extension and Ligation). L'expérience est faite avec la première approche qui consiste à utiliser un simple brin de la séquence d'ADN par spot. Cette séquence monocaténaire est censée s'hybrider avec la séquence cible étiquetée dans l'échantillon. La quantité du signal fluorescent produit détermine la quantité de l'ARN cible dans l'échantillon.

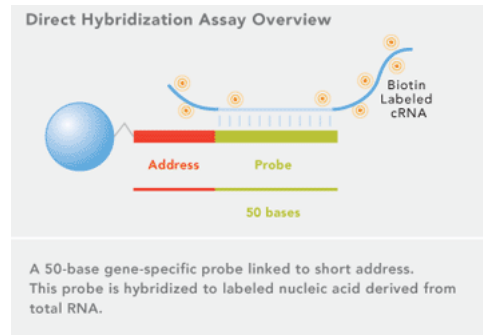


FIGURE 3 – An Illumina Direct Hybridization probe


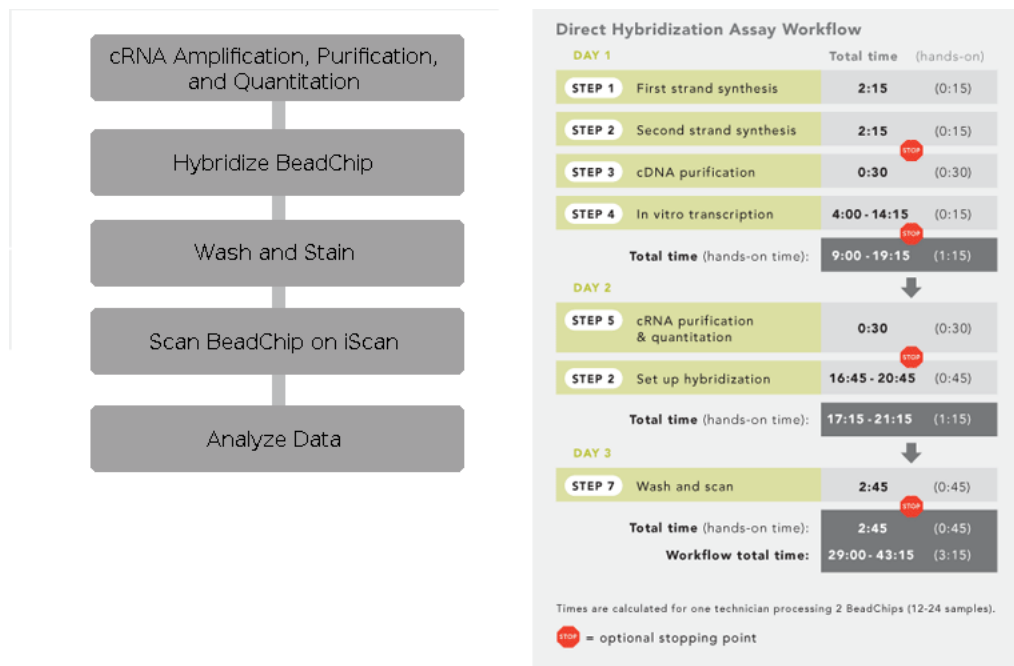


FIGURE 4 – Direct Hybridization assay workflow

2.3 Plan expérimental :

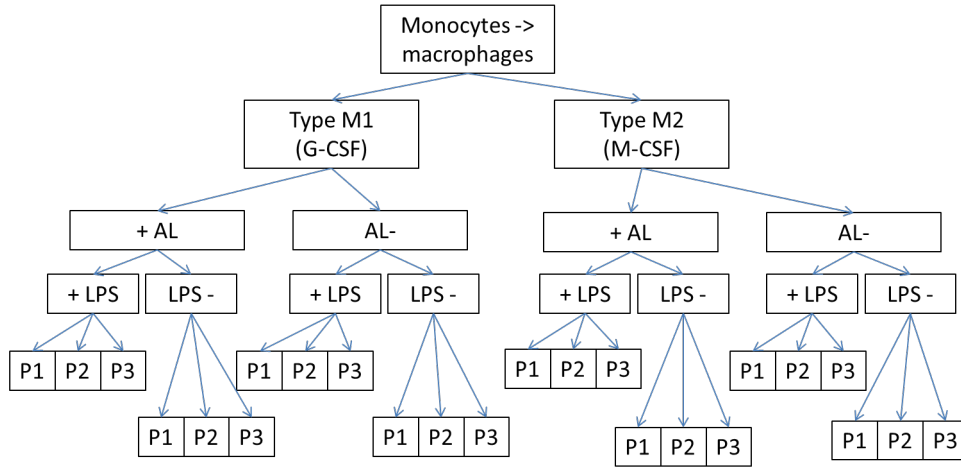

N=24 prélèvements
8 conditions expérimentales différentes

FIGURE 5 – Plan expérimental

L'expérience a été faite avec la puce ADN Illumina HumanHT-12 v4.0 BeadChip 12x1 avec 48210 sondes pour chaque prélèvement. 887 de ses sondes sont classés comme des sondes de contrôles. On se trouve donc avec 47323 individus sur 24 variables. Ce qui nous donne une matrice de données de dimension :

$$47323 \text{ rows} \left\{ \overbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}}^{24 \text{ columns}} \right.$$

2.4 Les sources de variations et les défis sur l'utilisation des puces ADN :

La littérature nous raconte que si on effectue à plusieurs reprises une même expérience, on peut se heurter à des valeurs d'expérience légèrement différentes à chaque exécution. Il est de ce fait très intéressant de voir de plus près les grandes étapes et les effets des processus biologiques qui sont derrière ces sources de quantité de variabilité dans l'étude des expressions génomique avec les puces ADN. De ce point de vue, ces variations sont considérées comme des bruits dans la phase d'analyse des expressions.

Est-ce que la variation d'un gène particulier est due au bruit de fond de la puce ou c'est réellement une différence entre les différentes expériences testées ? C'est là le vrai challenge. Si on prend un gène spécifique, combien de quantité de sa valeur représente la mesure de la variance due à la régulation des gènes et due à la quantité de bruit ? Ces sources de variation (Tableau : 1) nous mènent aux

problèmes de fiabilité et de reproductibilité dans les mesures des puces ADN qui sont souvent négligés. Néanmoins, une grande partie de la variabilité induite par la puce elle-même peut être déterminée à l'aide des techniques de réplifications ou d'autres techniques de séparations des bruits (Exemples : conception d'expérience statistique, normalisation des données). Plusieurs efforts ont été menés pour évaluer la fiabilité, la précision et la reproductibilité des puces ADN, inclus des projets comme MAQC(MicroArray Quality Control).

Facteur	Commentaires
Préparation des mRNA et la transcription	Tissus, les kits et les procédures variantes
Transcription	Les variations inhérentes dans la réaction, le type de l'enzymes utilisé
L'étiquetage (Labeling)	Depend du type,des procédures et l'âge de l'étiquette
Amplification (PCR)	Il est difficile de quantifier le rendement du PCR
Variations géométriques des broches	différentes surfaces et propriétés dues à des erreurs aléatoires de production
Volume de l'échantillon	fluctue stochastiquement même pour la même broche (pin)
Fixation de l'échantillon	La fraction de l'ADNc cible (une gouttelette) qui est chimiquement liée à la surface de la diapositive n'est pas prise en compte
Paramètre d'hybridation	influencé par plusieurs facteurs comme la temperature,le temps,le buffering
Hybridation non-spécifique	un ADNc s'hybride avec une sequence qui n'est pas exactement son complémentaire
Réglages de gain	déplace la répartition des intensités de pixels
Limitation de la plage dynamique	Variabilité de la saturation au bas de gamme ou au haut de gamme
Alignement d'image	Les images d'un même BeadArray à diverses longueurs d'onde correspondant à des canaux différents ne sont pas alignées ; différents pixels sont considérés pour le même emplacement
Placement de la grille	le centre du spot n'est pas bien localisé
Bruit de fond non-spécifique	Élévation erronée de la moyenne de l'intensité du bruit de fond
Forme de spot	L'intensité des spots irréguliers sont difficile à segmenter en bruit de fond
Segmentation	Des contaminants lumineux peuvent ressembler comme un signal(ex : poussière)
Quantification de spot	la moyenne des pixels, la médiane,...

TABLE 1 – Sources of fluctuations in a typical cDNA microarray experiment

3 DESCRIPTION DES DONNÉES :

3.1 Décryptage et lecture :

Après avoir scanné la puce, le scanner iScan d'Illumina exporte et produit des fichiers de sortie selon les paramètres définis. Les fichiers qui contiennent les intensités des spots (.idat) sont encryptés et d'autres fichiers sont fournis à titre indicatif et de mesure pour l'analyse.

File	Description
(Serial Number).txt	un fichier qui stocke la positions et l'identité de chaque spots, qui contient quelques informations sur les paramètres du scanner
Metrics.txt	un pour chaque BeadChip et contient des informations récapitulatives sur l'intensité des signaux, la quantité de saturation, la mise au point et l'enregistrement sur l'image (s) de chaque section
Effective.cfg	fichier de configuration des paramètres du scanner
(Serial Number).sdf	fichier de description des échantillons d'Illumina utilisé pour déterminer les propriétés (positions) physique d'une section et savoir les sections liées sur chaque échantillons
*.idat	contiennent la moyenne des intensités du signal de chaque spots

TABLE 2 – Description des fichiers de sortie

Pour la lecture des fichiers .idat, l'utilisation d'un fichier manifeste qui contient l'ensemble de tout les informations nécessaires concernant la puce est indispensable pour le decryptage : le nom et l'identifiant des gènes (Probe_id, Array_Address_Id, Symbol, Barcode), le statut d'un spot (regular, negative, biotin,...) Dans la suite logique des choses, Illumina fourni un logiciel payant (GenomeStudio Software) qui aide sur le traitement et l'analyse des puces ADN (Genotyping Module, Gene Expression Module, Methylation Module).

3.2 Données brutes via Bioconductor :

Bioconductor est un projet de développement et un ensemble de package (1380 packages en 2017) gratuit et open source dans l'analyse et la compréhension des données génomiques basé principalement en langage de programmation statistique R. Limma est un des packages dans Bioconductor pour l'analyse des expressions génomique des puces ADN. La fonction read.idat de package Limma permet de lire les fichiers idat d'Illumina BeadArray en fournissant en paramètre le fichier manifeste .bgx correspondant à la plateforme d'expression de gène à étudier. On obtient après un objet limma de type EListRaw qui contient les objets suivants :

<i>E</i>	matrice des intensité brutes
<i>other\$NumBeads</i>	matrice de mêmes dimensions que E donnant les nombre de spots (bead) utilisées pour chaque valeur d'intensité.
<i>other\$STDEV</i>	matrice de mêmes dimensions que E donnant un écart type au niveau des spots ou une erreur standard pour chaque valeur d'intensité.
<i>genes</i>	un data.frame des annotations des sondes qui contient des informations extraites du fichier manifeste relatif au type de puce utilisé : Probe_Id, Array_Address_Id, Status

TABLE 3 – Contenu de l'objet EListRaw retourné par la fonction read.idat() de limma

3.3 Contrôle et qualité :

Par approximation, on peut considérer qu'un signal émit par la puce soit :

- la vraie intensité produit par le gène cible
- un signal d'une hybridation non-spécifique
- un bruit de fond non-spécifique

La puce d'Illumina introduit alors des sondes appelées sonde de contrôle pour pouvoir mesurer et quantifier la qualité des données obtenues. Avec ces probes contrôles, on peut quantifier les bruits et la qualité du signal, de voir la qualité de la mesure d'expression d'un spot d'un BeadArray particulier et de son ensemble. Une valeur anormale produit par un seul BeadArray peut compromettre le résultat d'une analyse sur l'ensemble des données. On ne peut pas donc être assuré d'avoir un bon résultat en phase d'analyse si la qualité des données obtenues n'est pas acceptable.

Contrôle biologique	matrice des intensité brutes
Contrôle de l'étiquetage des échantillons (Labeling)	matrice de mêmes dimensions que E donnant les nombre de spots (bead) utilisées pour chaque valeur d'intensité.
Contrôle de l'hybridation	matrice de mêmes dimensions que E donnant un écart type au niveau des spots ou une erreur standard pour chaque valeur d'intensité.
Contrôle de génération des signaux	un data.frame des annotations des sondes qui contient des informations extraites du fichier manifeste relatif au type de puce utilisé : Probe_Id, Array_Address_Id, Status
Contrôle de bruit de fond	

TABLE 4 – Liste des contrôles des données d'Illumina BeadArray

4 PRÉTRAITEMENT DES DONNÉES :

4.1 Transformation :

4.2 Normalisation :

4.3 Filtrage :

5 ANALYSE DES DONNÉES DE TRANSCRIPTOME :

5.1 Gènes différentiellement exprimés :

5.2 Gènes co-exprimés :

6 INTERPRÉTATION :

Caractérisation d'un ensemble de gènes

Résumé